

Штатив для перемешивающих устройств

ES-2720

Паспорт

Версия 1.1 от 27.11.2015

Номер по каталогу 200.01.1030

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ecohim.pro-solution.ru | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

1. Общие указания

- 1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с конструкцией, порядком сборки и правилами эксплуатации штатива для перемешивающих устройств ES-2720.
- 1.2. В связи с продолжением работы по совершенствованию устройства, в конструкцию могут вноситься незначительные изменения, которые отсутствуют в паспорте.

2. Назначение

Штатив ES-2720 предназначен для использования в химических лабораториях для закрепления верхнеприводных перемешивающих устройств.

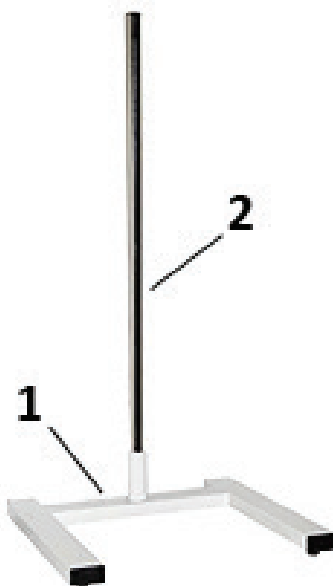


Рисунок 1 - Штатив ES-2720

3. Описание

Штатив (Рисунок 1) состоит из основания 1 и стойки для крепления привода 2. Основание имеет снизу 4 резиновые ножки.

4. Технические характеристики

- 4.1. Габариты основания, мм420x383x120
- 4.2. Высота штатива со стойкой, мм 830
- 4.3. Диаметр стойки, мм 22
- 4.4. Длина стойки, мм 800
- 4.5. Материал основания..... сталь, покрытая порошковой краской
- 4.6. Материал стойки труба из нержавеющей стали
- 4.7. Масса, кг, не более..... 3,5

5. Комплект поставки

- 5.1. Основание 1 шт.
- 5.2. Стойка для крепления привода 1 шт.
- 5.3. Стопорный винт М8..... 1 шт.
- 5.4. Ключ для завинчивания стопорного винта 1 шт.
- 5.5. Паспорт 1 шт.

Примечание: зажим для крепления привода приобретается отдельно (номер по каталогу 200.01.2040).

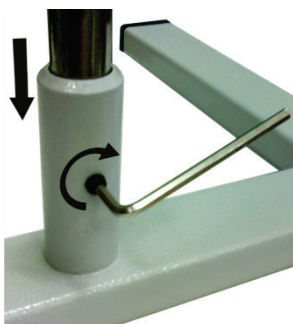


Рисунок 2 - Сборка штатива

6. Порядок сборки

- 6.1. Установите основание штатива на рабочем столе.
- 6.2. Вставьте стойку для крепления привода до упора в крепёжную втулку на основании штатива (Рисунок 2).

6.3. С помощью прилагаемого ключа ввинтите стопорный винт из комплекта крепежа в резьбовое отверстие сбоку крепёжной втулки и надёжно затяните его.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

7.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

8. Сведения о рекламациях

При обнаружении дефектов, некомплектности и появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу производителя:

9. Сведения о приемке


Штатив для перемешивающих устройств ES-2720 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий БКРЕ.418329.004ТУ, обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролёр _____

10. Дополнительная комплектация

	<p>Зажим для крепления перемешивающего устройства на штативе. Для штативов ES-2720, ПЭ-2730 под шток $\varnothing 16$ мм и стойку $\varnothing 22$ мм.</p>
	<p>Номер по каталогу 200.01.2040</p>

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ecohim.pro-solution.ru | эл. почта: ech@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70